

## OCS-500 Кольпоскоп

Многофункциональный центр гинекологической  
визуализации



Центр OCS-500 был специально разработан для повышения эффективности работы гинекологических кабинетов. Он имеет широкий диапазон увеличения изображения, позволяет беспрепятственно маневрировать, совмещает в себе функции кольпоскопии и гистероскопии, имеет высокое качество записи изображения, простой дизайн и не занимает много места в кабинете. Функция цифровой записи изображения и различные функции необходимые для наблюдения являются составной частью центра.



- ✓ Кольпоскопия и гистероскопия объединены в одну систему: Видеосистему и источник света можно использовать как для кольпоскопии, так и для гистероскопии.



- ✓ Цифровая запись изображения для кольпоскопии и гистероскопии: Систему видеосистема OTV S7V VISERA и цифровые камеры Olympus E-System можно подключать параллельно.



**VISERA**

**OLYMPUS  -SYSTEM**




- ✓ Усовершенствованные оптические характеристики: Рабочее расстояние от 220 до 350 мм, шестикратное бесступенчатое изменение масштаба изображения. Высокие окуляры позволяют точную кольпоскопию без усталости глаз.
- ✓ Улучшенные маневренные качества: Обладая ровными и быстрыми эксплуатационными характеристиками, центр OCS-500 был разработан для уменьшения стресса и увеличения эффективности работы.

### Кольпоскоп OCS-500

N1010863 Кольпоскоп «OCS-500»,  
E0497322 стандартный комплект  
цифровой комплект\*

В стандартный комплект входят:  
корпус OCS5-ZB, балансировочная консоль OCS5-BA, горизонтальная консоль OCS5-HA, световодный кабель OCS5-LG, штатив OCS5-STD, основание штатива OCS5-STB, подставка OCS5-TYS, источник света CLH-SC

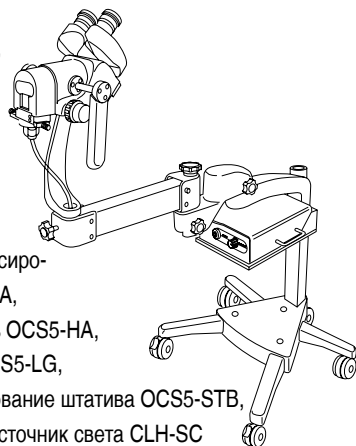

В цифровой комплект входят: стандартный комплект (см. выше) плюс адаптер цифровой камеры, камера E-410 с xD-Picture Card\*\* и дистанционным управлением

#### Технические характеристики

##### Размеры

Основание штатива (диаметр).....	600 мм
Высота (полная).....	1400 мм
Макс. радиус поворота.....	590 мм
Диапазон регулировки высоты консоли.....	930–1230 мм
Диапазон поворота консоли.....	270°

##### Оптическая система

Увеличение окуляра.....	10x
Масштаб изображения.....	1 : 6
Регулировка фокуса.....	220–350 мм
Фильтр.....	съёмный зелёный фильтр

##### Увеличение


220 мм рабочее расстояние.....	3,7–23,4x
300 мм рабочее расстояние.....	3,0–18,8x
350 мм рабочее расстояние.....	2,7–16,9x

##### Поле обзора


220 мм рабочее расстояние.....	∅ 58,5–9,3 мм
300 мм рабочее расстояние.....	∅ 73,1–11,6 мм
350 мм рабочее расстояние.....	∅ 82,4–13,1 мм

### Части кольпоскопа


N1011430 Корпус «OCS5-ZB»

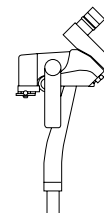


N1008400 Балансировочная консоль «OCS5-BA»

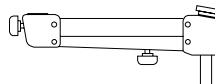


N1008500 Горизонтальная консоль «OCS5-HA»

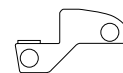

N1008600 Штатив «OCS5-STD»

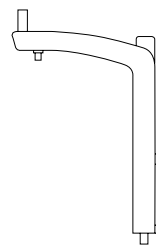


N1008700 Основание штатива «OCS5-STB»

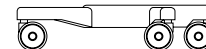


N1009200 Подставка «OCS5-TYS»,  
для источника света CLH-SC




N1010330 Дополнительная консоль «OCS5-OPA»,  
для стола OCS5-TBL

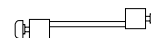

N1009500 Стол «OCS5-TBL»

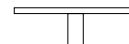

N1010230 Стойка «OCS5-SR»,  
Для видеосистемы VISERA

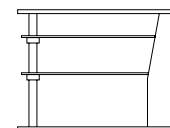


\* доступен только в Европе


\*\* xD-Picture Card является зарегистрированной торговой маркой фирмы Fuji Photo Film Co., Ltd.

## Цифровое сохранение неподвижных изображений

N2298030 Адаптер цифровой камеры «OCS5-DCAD2», для камеры типа Olympus E-System

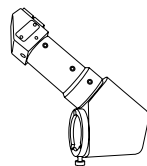

N2929792 Камера «E-410», комплект, включает линзу EZ-1745, батареи и зарядное устройство

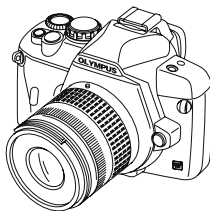

**OLYMPUS**  **-SYSTEM**


013652 дистанционное управление «RM-1», для камеры типа Olympus E-System



Для камер Olympus E-System, смотрите отдельные рекламные материалы.

## Аналоговое сохранение неподвижных изображений

N1010030 Адаптер «OCS5-35AD», для камеры SC-35 (не поставляется в Европу)

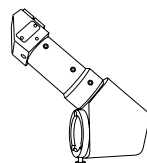

A9317 Адаптер «PM-CAMS2», для камеры SC-35 (не поставляется в Европу)




A5033 Камера «SC-35», 35 мм, SLR (не поставляется в Европу)



## Видео-документация

N1010130 Видео-адаптер «OCS5-TVAD1»

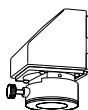


N1009100 Адаптер окуляра «OCS5-ETVM»



Подробности для видео-адаптеров и фитингов смотрите страница EQ-121.


## Держатель для монитора

N9019293 Стойка для ЖК-монитора «OCS5-LCDM2», для механического крепления в нужном положении ЖК-мониторов, в соответствии со стандартами VESA 75 и VESA 100, максимальная нагрузка 5,5 кг, для фиксации к OCS-500 без кронштейна для ЖК

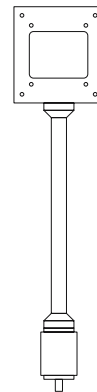


## Стандартная видеосистема

A4898 Блок управления «OTV-SC»

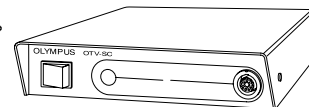

Подробности смотрите страница EQ-355.


A4959 Источник света «CLH-SC»

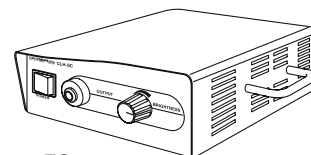

Подробности смотрите страница EQ-355.

## Видеосистема VISERA


Видеосистема VISERA OTV-S7V

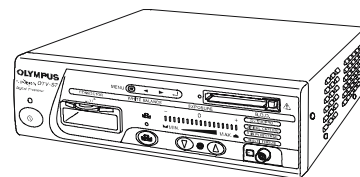

**VISERA**

Подробности смотрите страницы EQ-150/-160/-170.

N1014763 Источник света «CLV-S40»

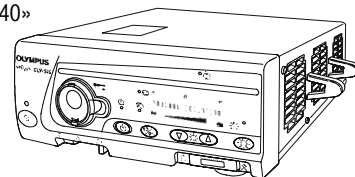


**VISERA**

Подробности смотрите страница EQ-399.

## Световодный кабель

N1008800 Световодный кабель «OCS5-LG»

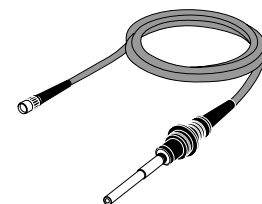

## OCS-500 Кольпоскоп

Схема совместимости

